

MULTIFUNZIONE 4 IN 1



01

LASER AL DIODO

02

FOTO-RINGIOVANIMENTO IPL

03

ND YAG TATTOO REMOVAL

04

RF - RADIO FREQUENZA

**PERSONALIZZABILE
ANCHE IN VERSIONE**

2 IN 1**3 IN 1**



Laser al Diodo

Depilazione indolore, Depilazione definitiva, adatto a tutte le tonalità di pelle

Elight-IPL

Elight per la Depilazione, Ringiovanimento della pelle, Terapia vascolare, Pigmentazione, Terapia dell'acne

Laser ND YAG

Rimozione della linea degli occhi, Rimozione sopracciglia, Rimozione Tattoo, Rimozione lentiggini

RadioFrequenza

Rassodamento/lifting della pelle, rimozione delle rughe sul corpo

TUTTI I MODULI SONO INTERCAMBIABILI:

Con la nostra macchina verticale, ogni tecnologia (Laser Diodo, IPL Elight, YAG ND, RF) funziona in modo indipendente. Se desideri ottimizzare o personalizzare una funzione, basta sostituire o aggiornare il singolo modulo. Massima efficienza, zero sprechi!





LASER AL DIODO

Laser a diodo 755/808/1064nm, per la rimozione dei peli su tutti i tipi di pelle, indolore

755



755 nm

808



808 nm

1064



1064 nm



1200w



1600w



1800W



2000W




VISO



**100 MILIONI
DI COLPI**



PRINCIPI DI DEPILAZIONE

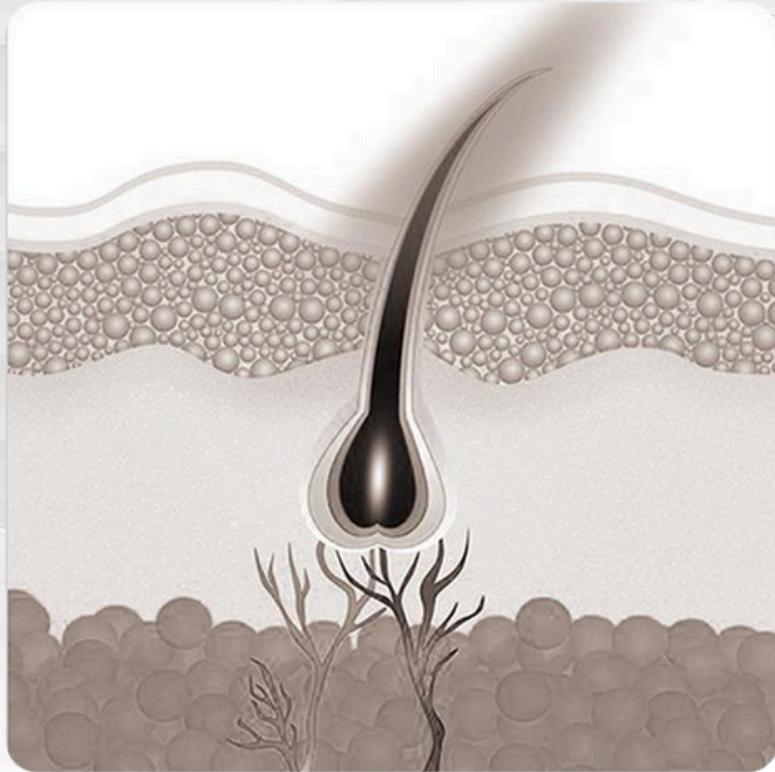

Il laser agisce selettivamente sulla melanina nel follicolo pilifero, distruggendo l'area di crescita dei peli



Perdita naturale dei peli, prevenzione della rigenerazione e raggiungimento dello scopo della depilazione



La depilazione stimola anche la rigenerazione del collagene, restringe i pori e rende la pelle soda e liscia



LASER AL DIODO

Adatto per la depilazione su qualsiasi parte del corpo



Braccia



Gambe



Viso



Ascelle



Schiena



Petto

Possibilità di Scelta della Potenza in Watt

1000W/1200W/1600W/1800W
2000W

Possibilità di Scelta del Sistema di Raffreddamento (in 1 minuto)

1400W TEC + Air cooling + Water cooling

Sistema FAC: energia laser ultra-concentrata (10J/cm²)

Trasferimento efficiente al 99% per risultati immediati e superiori.



CON FAC
FASCIO CONCENTRATO

Areslite – Distanza di lavoro 32mm
Densità energetica: 10J/cm² @ 20ms



SENZA FAC
IL FASCIO SI DISPERDE

Distanza di lavoro 32mm
Densità energetica: solo 2J/cm² @ 20ms

Il sistema FAC concentra il fascio laser con lenti speciali, mantenendo massima potenza (10J/cm²) sulla pelle anche a distanza: Riduce gli sprechi, Sessioni più veloci e Consumi ottimizzati.

in poche parole: più risultati con meno passate



ND YAG TATTOO REMOVAL



5 Testine di Trattamento

Fisso 1064nm e 532nm, regolabile 1064nm e 532nm (regolabile 1-7 mm) per rimozione di tatuaggi, rimozione di nevi, ecc.

Multifunzione

1320nm per il ringiovanimento della pelle

Spia luminosa

La posizione del punto è la posizione della spia luminosa più precisa



Regolabile
532 nm



Regolabile
1064nm



Fisso
1320nm



Fisso
532nm



Fisso
532nm



VANTAGGI - ND YAG

Durata fino a più di 1,5 milioni di volte -Contatore sull'impugnatura -Indicatore LED rosso, più facile da puntare sulla zona da trattare

TRATTAMENTI


Rimozione di Tatuaggi

Rimozione di Pigmenti

Rimozione Lentiggini

Peeling al Carbonio

Ringiovanimento Pelle

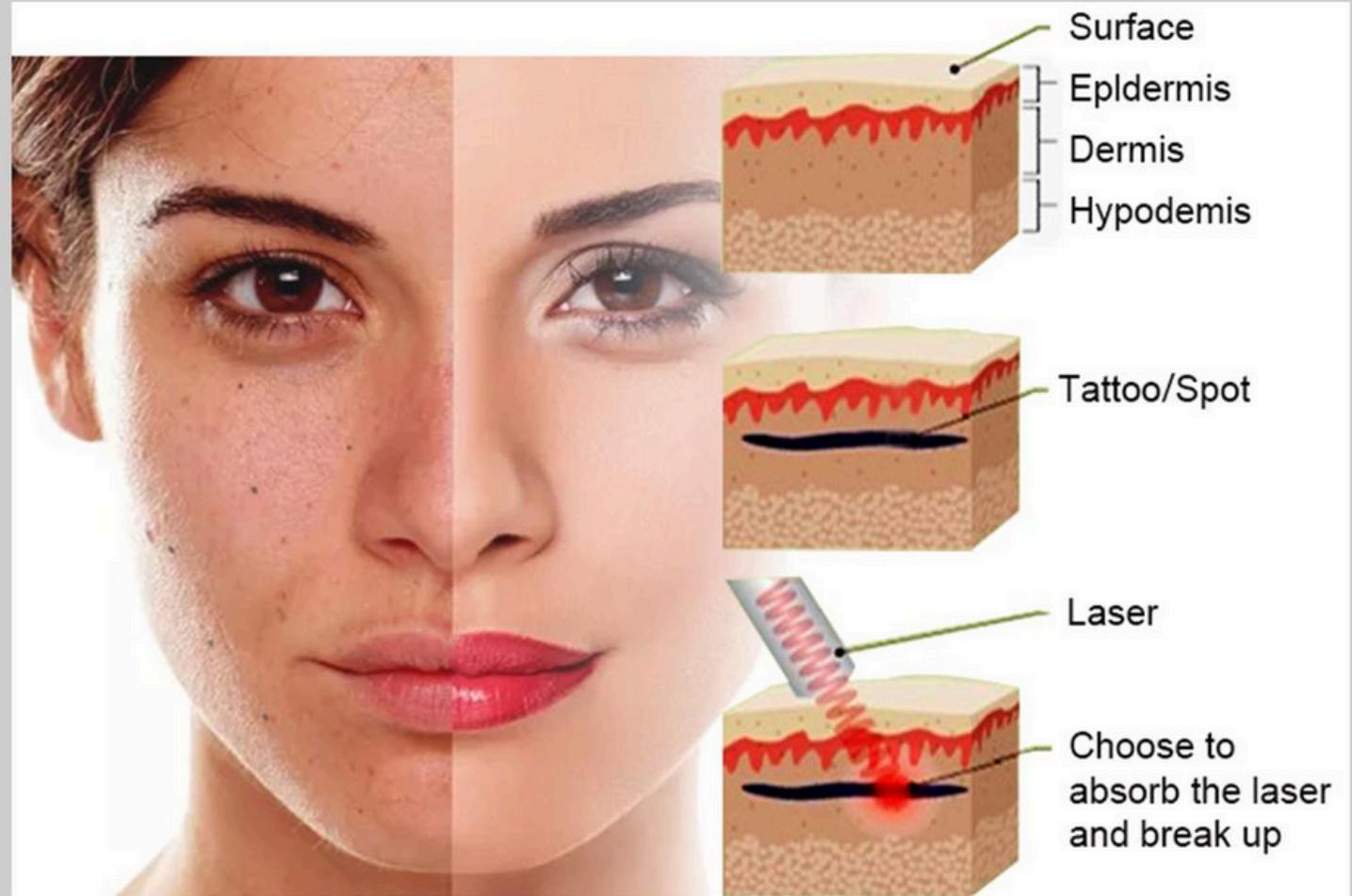



FOTORINGIOVANIMENTO- IPL

01

IPL DI QUALITA' SUPERIORE

Manipolo con sistema di super raffreddamento

02

DIMENSIONE SPOT OPZIONALE

15*50mm, 15*35mm, 12*30mm

03

SUPER DURATA

IPL: 3.000.000 Colpi

04

7 FILTRI

420/510/560/585/640/690/755nm

**3 MILIONI
DI COLPI**





FOTORINGIOVANIMENTO- IPL



420
nm

Rimozione
dell'Acne


Trattamenti
Vascolari



510
nm

Terapia della
Pigmentazione


Rimozione
Lentiggini

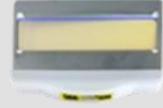

560
nm

Ringiovanimento
della Pelle

Rimozione delle
Rughe

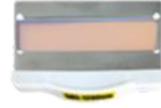

585
nm

Problema della
Sensibilità

Riduzione dei
Rossori del Viso



640
nm

Rimozione dei
Peli

Pelli
Chiare



690
nm

Rimozione dei
Peli


Pelli
Olivastre



755
nm

Rimozione dei
Peli

Pelli
Scure

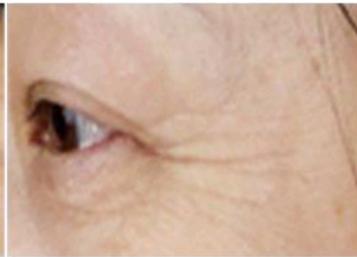


COME FUNZIONA

Grazie al design scientifico dell'impugnatura a laser diodo, il fascio laser ad alta energia penetra istantaneamente nella pelle raggiungendo il follicolo pilifero durante il trattamento.

La luce emessa viene assorbita dalla melanina presente nel follicolo, danneggiandolo e permettendo così la rimozione permanente del pelo.

La larghezza dell'impulso laser è impostata in modo da essere più breve del tempo di percezione del corpo umano: il singolo impulso di luce è già terminato prima che venga avvertita sensazione di dolore.



In questo modo si ottiene un trattamento indolore, aumentando il comfort e l'esperienza positiva del cliente.

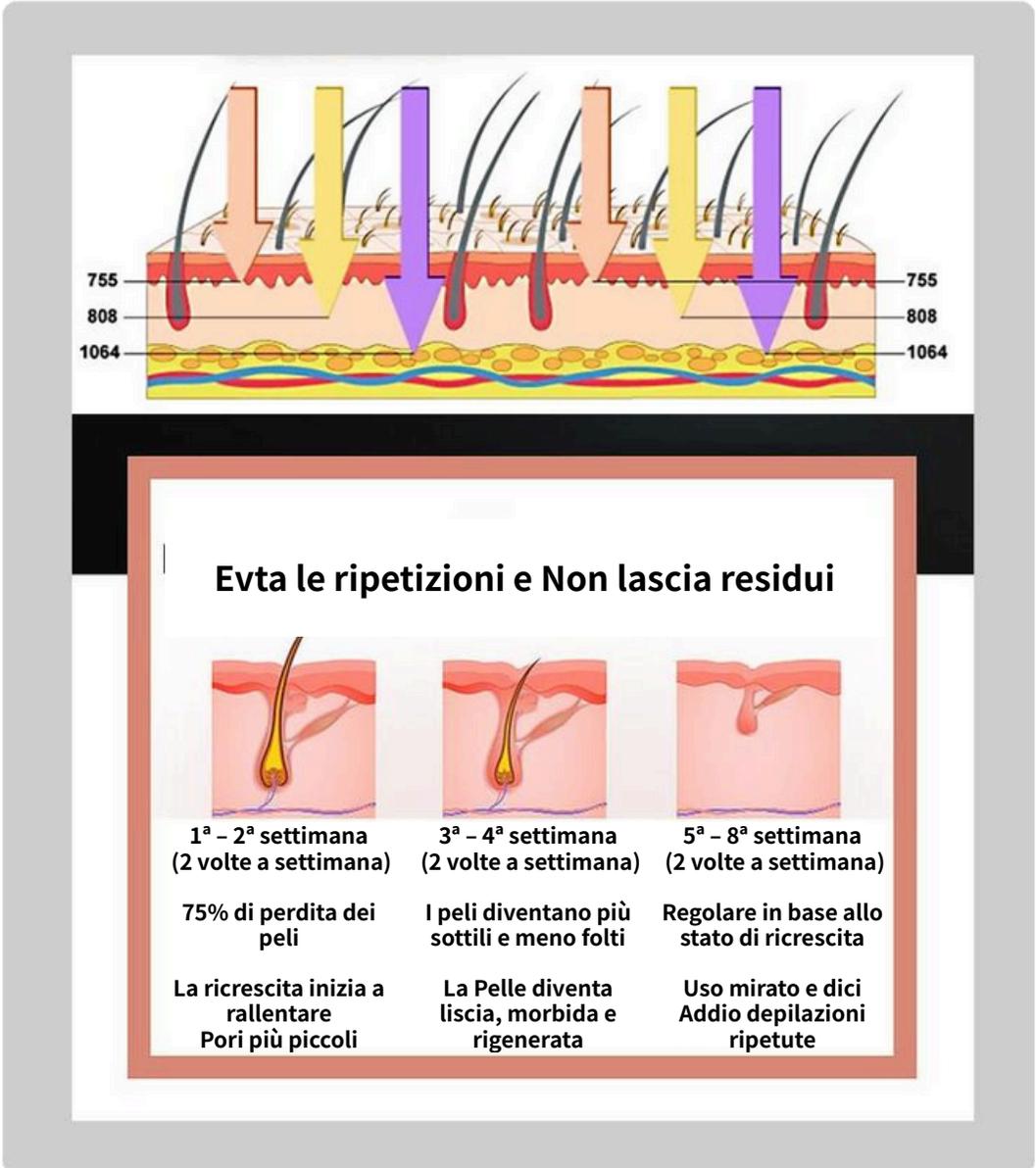



RADIO-FREQUENZA - RF

Adatto a 6 tipi di aree terapeutiche, per garantire il trattamento all'angolo dell'occhio e in altre zone del viso.

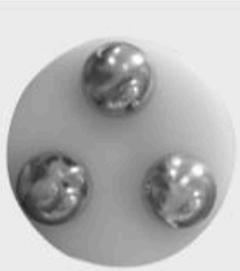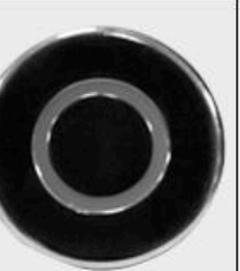					
Testa tripolare da 36 mm	Testa tripolare da 28 mm	Testa occhi da 12 mm	Testa Bipolare da 38 mm	Testa Bipolare da 28 mm	Testa Bipolare da 14 mm



RADIO-FREQUENZA - RF

COME FUNZIONA

La potente onda a 40 kHz viene emessa sul corpo generando un intenso impatto sulle cellule adipose. Questo provoca attrito tra di esse, favorendo il consumo di calorie e la riduzione del loro volume. Inoltre, l'azione combinata di shock e vibrazioni ad alta intensità causa la rottura immediata di un gran numero di cellule adipose, riducendone significativamente la quantità complessiva.

Il trattamento con radiofrequenza agisce invece sul collagene cutaneo: il calore generato penetra nel derma e nel tessuto sottocutaneo, stimolando la contrazione delle fibre di collagene esistenti e la produzione di nuove fibre.

Questo processo aiuta a rassodare e ringiovanire la pelle, migliorando tono, compattezza e uniformità, oltre a ridurre discromie e imperfezioni pigmentarie.





SCHERMO TOUCH 4K





EFFETTI DEI TRATTAMENTI



DEPILAZIONE



RINGIOVANIMENTO



RIMOZIONE LENTIGGINI



RIMOZIONE DELL'ACNE



TERAPIA VASCOLARE



DIMAGRIMENTO

Grazie

per la Vostra Attenzione



Informazioni di Contatto



351. 726.14.67



www.kocci.vip



info@kocci.vip



Bergamo, Italia
